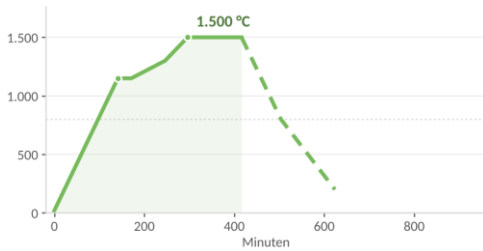


classic · Y-ML unlimited · Y-ML pioneer

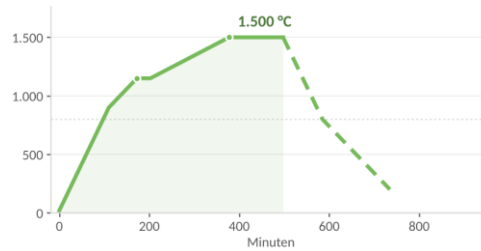
republicZr® Standard (Universal)

**1.500 / 1.530 °C · 120 Min. halten · 10 h 24 min**

Alle Indikationen

classic · Y-ML unlimited · Y-ML pioneer

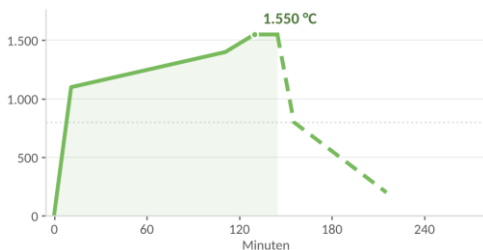
republicZr® Langprogramm (Schonend)

**1.500 / 1.530 °C · 120 Min. halten · 12 h 15 min**

Massereich, weitspannig, hohe Beladung

Y-ML pioneer

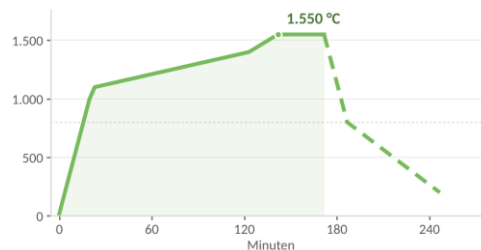
republicZr® Ultra Speed

**1.550 °C · 15 Min. halten · 3 h 35 min**

Nur Einzelkronen · eine Lage/Schale · nicht in jedem Ofen darstellbar

Y-ML pioneer

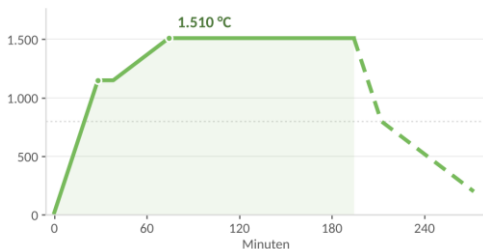
republicZr® Speed GT1 pro

**1.550 °C · 30 Min. halten · 4 h 07 min**

Nur Einzelkronen · eine Lage/Schale · abgestimmt auf den GT1 pro

classic · Y-ML unlimited

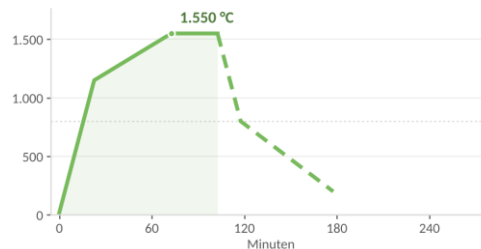
republicZr® Speed 4h

**1.510 / 1.550 °C · 120 Min. halten · 4 h 32 min**

Bis 3 Glieder, max. 1 Brückenglied

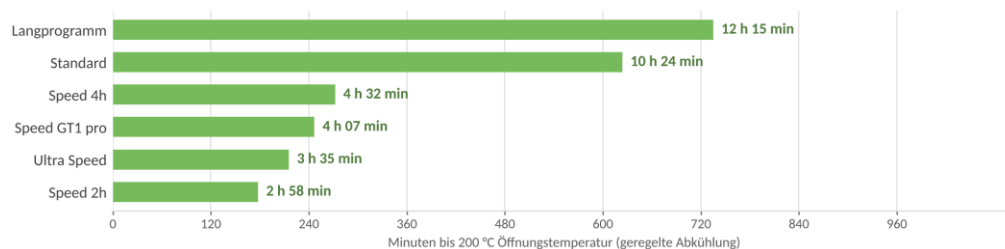
classic · Y-ML unlimited

republicZr® Speed 2h

**1.550 °C · 30 Min. halten · 2 h 58 min**

Bis 3 Glieder / unlimited nur Kronen · eine Lage/Schale

Laufzeit im Vergleich



Durchgezogen: Aufheizen und Haltezeit. Gestrichelt ab Spitzentemperatur: Abkühlung, bis 800 °C geregelt (gepunktete Linie), darunter geregelt oder frei.

Zeitmaßstab: Standard und Langprogramm bis 960 Minuten, die vier Speed-Programme bis 280 Minuten. Der Balkenvergleich zeigt alle sechs Programme im gleichen Maßstab.

Zeiten ab 20 °C bis 200 °C Öffnungstemperatur, geregelte Abkühlung. Angaben mit Schrägstrich: Y-ML / classic. Vollständige Parameter und DEKEMA-Befehle siehe Sinteranleitung.